

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*




Couplage de la pompe avec l'application myDiabby

- Téléchargez les 2 applications myDiabby et mylife sur le téléphone. Connectez-vous sur chacune des 2 applications.**
L'application mylife permet de collecter les données de la pompe à insuline Ypsopump. Mylife enverra ensuite automatiquement les données sur myDiabby Healthcare, qui est l'application qui permet d'être en lien avec l'équipe médicale.




- Connectez en Bluetooth la pompe Ypsopump à l'application mylife en suivant le guide de la pompe à insuline.**


- Connectez-vous sur l'application myDiabby et ouvrez l'onglet « Mes objets connectés »**

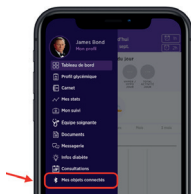

- Sélectionnez « Je connecte ma pompe à insuline », puis « Ypsopump ». Cliquez sur le bouton « Connecter mon application de santé ».**

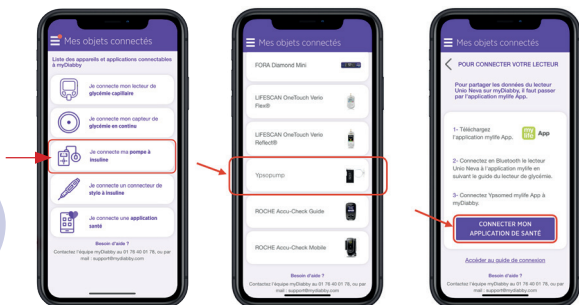

5 Entrez les identifiants du compte mylife App puis Validez.

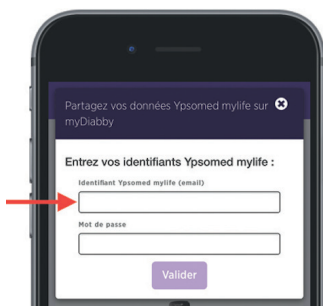

6 Les données de mylife Ypsopump sont maintenant partagées sur l'application myDiabby !



A NOTER

- Toutes les données entrées manuellement ou en Bluetooth dans l'application mylife sont partagées avec l'application myDiabby (données de pompe, glycémies, repas, etc...)
- Une fois les comptes Mylife et myDiabby Healthcare connectés, les données sont régulièrement envoyées de façon automatique. Cet envoi peut occasionner un délai entre la synchronisation des données sur Mylife et leur affichage sur myDiabby Healthcare.



Pour une question sur l'application myDiabby : support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.

Document applicable à partir de la version 2.30 de myDiabby Healthcare



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



GCYPV03D20242511FR