

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*




- 1 **Connectez en bluetooth la pompe TouchCare Nano ou 300 à l'application EasyPatch ou téléchargez les données de votre PDM sur l'application EasyTouch, en suivant le guide de la pompe à insuline.**

L'application EasyPatch permet de piloter la pompe avec le smartphone, les données sont automatiquement téléchargées sur le **cloud Medtrum**. Les données disponibles sur le cloud Medtrum seront ensuite automatiquement envoyées sur myDiabby Healthcare, qui est l'application qui permet d'être en lien avec l'équipe médicale.

- 2 **Connectez-vous à votre compte myDiabby Healthcare depuis un ordinateur OU l'application mobile myDiabby.**

- 3 Cliquez sur l'onglet «**Mes objets connectés**», puis sur «**Je connecte une application santé**».

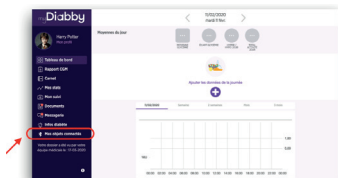

- 4 Choisissez le bouton **Medtrum**




- 5 Entrez votre **identifiant** et le **mot de passe** du **compte EasyPatch / EasyTouch**. Lisez les conditions d'utilisation, **cochez la case d'acceptation**, **entrez votre nom** dans le champ dédié puis **cliquez sur «Autoriser»** pour **accepter** le partage des données.

- 6 Ce message apparaît à l'écran et confirme que le compte **cloud Medtrum** est bien connecté à **myDiabby Healthcare**. Cliquez sur « **Retour** » pour retourner sur myDiabby Healthcare.



Vos données de pompe à insuline sont maintenant partagées sur myDiabby Healthcare !

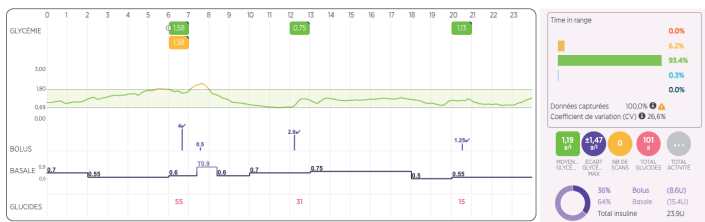

A NOTER

Vérifiez régulièrement que les données de votre pompe à insuline TouchCare sont bien visibles sur le cloud Medtrum pour que l'équipe médicale puisse voir les résultats sur myDiabby Healthcare.

> Le téléchargement des données est automatique sur l'application EasyPatch et manuel sur l'application EasyTouch.

> Une fois les comptes cloud Medtrum et myDiabby Healthcare connectés, les données sont régulièrement envoyées de façon automatique.
Les données affichées respectent un décalage de 3 heures par rapport aux dernières données disponibles.

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone
France : **01 76 40 01 78**
Belgique : **02 320 11 96**

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.

Document applicable à partir de la version 2.30 de myDiabby Healthcare



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



0459

GCMTCV03D20242511FR