

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*



omnipod®
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

Partage des données de la pompe avec l'application myDiabby avec un téléphone

Matériel nécessaire

Le **smartphone**

Android sur lequel a été téléchargée l'**application myDiabby**, compte patient **connecté**.



Le PDM de l'Omnipod Dash


Un adaptateur permettant de brancher un câble USB sur le smartphone



Le câble USB de la pompe Omnipod Dash

Marche à suivre

- 1 Ouvrez l'**application myDiabby** sur votre téléphone et connectez-vous avec vos identifiants
- 2 Branchez **d'abord le câble au téléphone** grâce à l'adaptateur
- 3 Déverrouillez votre PDM Dash (avec votre code PIN). Ensuite, branchez le câble au PDM Dash
- 4 Le PDM affiche le message « Exporter les données du PDM » ou « Charger le PDM ? ». > Cliquez sur « EXPORTER ».
Patientez pendant la « Préparation des fichiers pour exportation »
- 5 Le PDM indique « Les données de votre PDM sont prêtes à être exportées ». Cliquez sur « Terminé ».
 - Le PDM est prêt pour le transfert des données sur le téléphone.
 - Le symbole du câble clignote et une barre de chargement apparaît pendant le partage des données. **Patientez.**

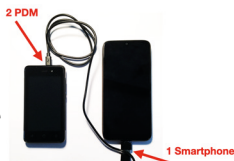

Attention :

Ne débranchez pas le câble du lecteur ou du téléphone pendant le partage des données. S'il y a beaucoup de données à partager, le transfert peut prendre plusieurs minutes.



- 6 Les données de la pompe s'affichent sur l'application myDiabby!
Vous pouvez maintenant débrancher le téléphone et le PDM

Partage des données de la pompe avec l'application myDiabby avec un ordinateur


- 1 Sur un ordinateur, téléchargez et installez le logiciel "myDiabby Uploader" depuis la page www.mydiabby.com/uploader



myDiABBY
UPLOADER

MyDiabby Uploader est un petit logiciel à installer sur ordinateur qui **permet de télécharger les données de lecteurs de glycémie, capteurs de glycémie et pompes à insuline** sur votre compte myDiabby.

- 2 Une fois le logiciel téléchargé, ouvrez-le et **connectez-vous avec vos identifiants myDiabby habituels**.

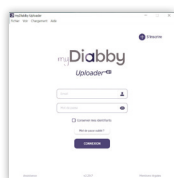

- 3 Choisissez l'appareil à télécharger (Omnipod) dans la liste, puis cliquez sur **Valider**.


- 4 Déverrouillez le PDM Dash avec le code pin, puis **branchez le PDM Dash à l'ordinateur** grâce à un câble USB.



- 5 Sur le PDM Dash, choisissez « **Exporter les données** ». Attendez la fin de l'export des données puis appuyez sur OK. Cliquez sur « **Envoyer** » sur myDiabby Uploader.



- 6 Les données se chargent maintenant sur myDiabby. Une fois le chargement terminé, pour accéder aux données sur myDiabby, cliquez sur le bouton « **Voir les données** »

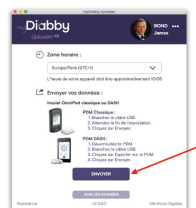

- 7 Les résultats sont maintenant disponibles sur myDiabby (débits de base, bolus, glycémies, etc...)

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.24 de myDiabby Healthcare

GCOMNDV03D20243005FR