

GUIDE DE CONNEXION


Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*



Connexion en NFC des stylos NovoNordisk NovoPen 6 et Echo Plus

Le transfert de données se fait à l'aide de l'antenne NFC en approchant le stylo insuline de votre smartphone.

- Activez le NFC sur votre smartphone** (dans les paramètres) - sur certains smartphones, le NFC est activé par défaut et n'est pas désactivable
- Connectez-vous sur l'application **myDiabby** et ouvrez l'onglet «**Mes objets connectés**»
- Sélectionnez «**Je connecte un connecteur de stylo à insuline**»

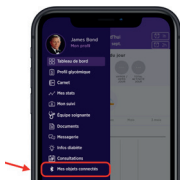


- Sélectionnez «**Stylo insuline Novo Nordisk NovoPen® 6 / NovoPen Echo® Plus**», puis cliquez sur «**je connecte mon appareil**»



- La recherche est en cours :**

- Sur Android, approchez le stylo insuline de votre Smartphone au niveau de sa puce NFC.
- Sur iPhone, approchez votre stylo insuline de la puce NFC. Votre smartphone vibre ensuite une fois que le stylo est détecté et une confirmation apparaît à l'écran.

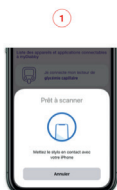


Une pop-up apparait avec une barre de progression : **le stylo est détecté**, ne pas bouger le stylo le temps du transfert



6 Sélectionnez votre stylo, puis confirmez votre sélection.



7 Sélectionner le type d'insuline de votre stylo : toutes les insulines compatibles sont présentées dans la liste

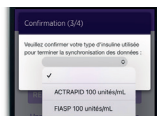

8 Votre stylo apparait comme connecté, appuyez sur «**Synchronisation**» pour récupérer les données présentes sur le stylo en effectuant de nouveau l'étape 5.

Vos données sont synchronisées sur votre compte myDiabby Healthcare !



Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la dose d'insuline apparaît sur l'application myDiabby, **COCHEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.



Utilisation quotidienne

- Ouvrez l'application myDiabby**
- Rendez-vous dans le menu «**Mes objets connectés**»
- Au niveau du stylo que vous avez connecté, appuyez sur «**Synchroniser**»
- Approchez votre stylo insuline de l'antenne NFC de votre smartphone** jusqu'à ressentir une vibration ou entendre un son de confirmation
- Vos données sont enregistrées !**

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : **01 76 40 01 78**

Belgique : **02 320 11 96**



MDHC SAS
66 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



CE MD
0459



Document applicable à partir de la version 2.25 de myDiabby Healthcare

GCNNPV04D20241406FR