

myDiabby Uploader

myDiabby Uploader

POTTER
Harry

Selecteer uw apparaat

☒ Medtronic 523, 733, Vero ou 530G (utilisant Contour Next Link)



☒ Medtronic 630G, 640G, 670G (utilisant Contour Next Link 2.4)



☐ Tandem tslim X2



VALIDEER


Juridische informatie
Over ons

Steuern v2.36.0

Fase 2 : de aansluiting


- 4** Indien de insulinepomp en de Contour Next Link 2.4-lezer zijn aangesloten, vink dan het vakje «**De meter en de pomp zijn gekoppeld**» aan.

Indien de insulinepomp en de Contour Next Link 2.4-lezer niet zijn aangesloten, **verwijder dan het vinkje bij «De meter en de pomp zijn gekoppeld»** en voer het serienummer van de pomp in (op de achterkant van de pomp)

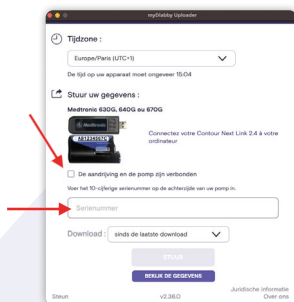

- 5** Sluit de Contour Next Link 2.4-lezer aan op een USB-poort van de computer.

- 6** Selecteer de duur van de te uploaden gegevens en klik dan op «**Verzenden**»

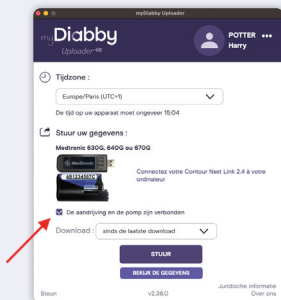

- 7** Uw gegevens worden gedownload naar de computer. Indien de pomp niet met de lezer was verbonden, moet u de verbinding op de pomp bevestigen om het downloaden te starten.

- 8** Aan het einde van het downloaden klikt u op «Gegevens bekijken» om naar het myDiabby online platform te gaan en al uw resultaten te bekijken.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon

 France : 01 76 40 01 78

 Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare



0459