

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*



dexcom


Si vous utilisez une application mobile Dexcom passez directement à l'étape 3.

- 1 Créez un compte Dexcom Clarity** depuis ce site : <https://uam2.dexcom.com//index.html#/register>





- 2 Téléchargez le Dexcom Clarity Uploader** depuis cette page : <https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/home-user-upload>


Puis téléchargez les données du capteur sur Dexcom Clarity en suivant les instructions sur l'écran.

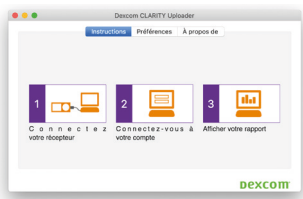

- 3 Connectez-vous au compte myDiabby healthcare** depuis un ordinateur **OU** l'application mobile.
- 4 Cliquez sur l'onglet « Mes objets connectés »,** puis sur « Je connecte mon capteur de glycémie en continu ».

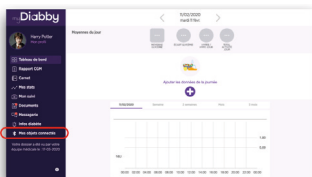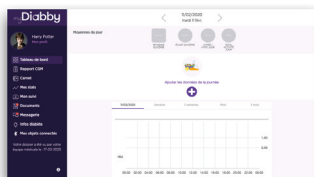




5 Choisissez le bouton **Dexcom**, puis cliquez sur le bouton « **CONNECTER MON APPLICATION DE SANTE** »

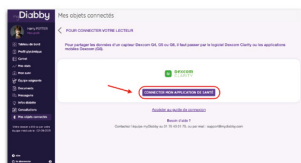

7 Ce message apparaît à l'écran et confirme que le compte **Dexcom est bien connecté à myDiabby Healthcare**. Cliquez sur « **Retour** » pour retourner sur myDiabby Healthcare.

Les données de glucose en continu sont maintenant partagées sur myDiabby Healthcare !

6 Entrez l'**identifiant** et le **mot de passe** du compte **Dexcom**. Lisez les conditions d'utilisation, puis **entrez votre nom** et cliquez sur « **Autoriser** » pour accepter.

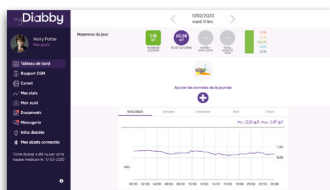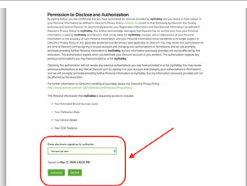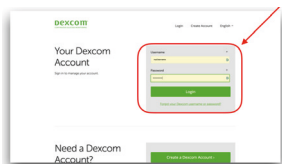

A NOTER

Téléchargez régulièrement les données du capteur Dexcom sur Dexcom Clarity pour que l'équipe médicale puisse voir les résultats sur myDiabby Healthcare.

> Une fois les comptes **Dexcom** et **myDiabby Healthcare** connectés, les données sont régulièrement envoyées de façon automatique. Les données affichées respectent **un décalage de 3 heures** par rapport aux dernières données disponibles.

> Si vous utilisez un **Dexcom G6 couplé à la pompe à insuline Tandem t:slim X2**, il vous suffit de télécharger les données via **myDiabby Uploader** pour les afficher sur votre compte myDiabby Healthcare. Pour cela, vous pouvez vous **référer au guide dédié**.

Pour une question sur l'application myDiabby : **support@mydiabby.com** ou par téléphone

France : **01 76 40 01 78**

Belgique : **02 320 11 96**

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.

Document applicable à partir de la version 2.32 de myDiabby Healthcare



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



GCDXCV05D20250703FR