

GUIDE DE CONNEXION


Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*



Connexion en NFC des lecteurs Glucofix® Tech et Glucofix® Tech 2K

Le transfert de données se fait à l'aide de l'antenne NFC en approchant le lecteur de votre smartphone.

- 1 Assurez-vous que le lecteur de glycémie est réglé à la bonne date et heure pour utiliser la connectivité avec l'application myDiabby.
- 2 **Activez le NFC sur votre smartphone** (dans les paramètres) *sur certains smartphones, le NFC est activé par défaut et n'est pas désactivable*
- 3 Connectez-vous sur l'application myDiabby et ouvrez l'onglet « Mes objets connectés »
- 4 Sélectionnez « Je connecte mon lecteur de glycémie capillaire », puis sélectionner votre lecteur dans la liste

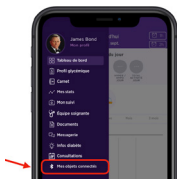

- 5 Cliquez sur le bouton « Je connecte mon lecteur »



- 6 Activez le NFC sur le lecteur. Pour cela :

- 1 Ouvrez le menu paramètre du lecteur : appuyez sur les boutons **M** (marche / arrêt) et **▲** simultanément pendant 4 secondes
- 2 Appuyer sur le bouton **▼**, un N clignote
- 3 Appuyer sur le bouton **M**, « Off » apparaît
- 4 Appuyer sur le bouton **▼**, « On » apparaît
- 5 Appuyer sur le bouton **M**, « SET » apparaît, le NFC est activé sur votre lecteur.
- 6 **Éteignez le lecteur** : appuyez le bouton M pendant 3 secondes



7 La recherche est en cours :

- Sur Android, **approchez le lecteur de votre Smartphone** au niveau de sa puce NFC.
- Sur iPhone, **approchez votre lecteur de la puce NFC**. Votre iPhone vibre ensuite une fois que le lecteur est détecté et une confirmation apparaît à l'écran.



Utilisation quotidienne

1 **Faire la mesure de glycémie** comme habituellement.


2 **Connectez-vous sur l'application myDiabby** et ouvrez l'onglet « **Mes objets connectés** »

3 Au niveau du lecteur que vous avez connecté, **appuyez sur « Synchroniser »**



4 **La recherche est en cours :**


- Sur Android, approchez le lecteur de votre Smartphone au niveau de sa puce NFC.
- Sur iPhone, approchez votre lecteur de la puce NFC. Votre iPhone vibre ensuite une fois que le lecteur est détecté et une confirmation apparaît à l'écran.

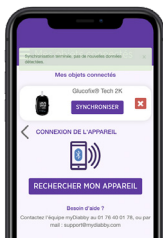

Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la glycémie apparaît sur l'application myDiabby, **COCHÉZ** ou **VÉRIFIEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.

Vous pouvez **ajouter des remarques** ou doses d'insuline.

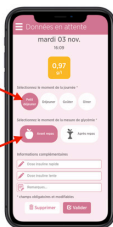

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare