

## GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare\*




**ONETOUCH**  
Ultra Plus Reflect

## Couplage du lecteur avec l'application myDiabby

Lorsque vous coupez votre lecteur de glycémie OneTouch Ultra Plus Reflect à l'application myDiabby, la date et l'heure se règlent automatiquement sur le lecteur à partir de la date et heure du téléphone.

- 1 Activez le **Bluetooth** sur le **smartphone**
- 2 Connectez-vous sur l'**application myDiabby** et ouvrez l'onglet « **Mes objets connectés** »
- 3 Sélectionnez « **Je connecte mon lecteur de glycémie capillaire** », puis sélectionner votre lecteur dans la liste

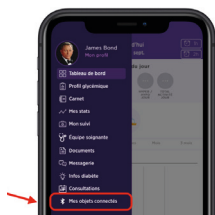

- 4 Cliquez sur le bouton « **Je connecte mon lecteur** »



- 5 Allumez le lecteur OneTouch Ultra Plus Reflect en faisant un appui long sur le bouton OK.

- 6 **Activez le Bluetooth sur le lecteur :**
  - Dans le menu du lecteur, choisissez “Réglages”, puis “Bluetooth”
  - Sélectionnez “Activé”
  - Appuyez sur le bouton retour (flèche vers la gauche) pour retourner sur l'écran d'accueil du lecteur
  - Le symbole  (Bluetooth) est allumé en haut à droite de l'écran du lecteur



7 Sur l'application myDiabby, cliquez sur le bouton «Rechercher mon lecteur»

8 Le lecteur apparaît à l'écran. Cliquez sur «Ajouter»

9 Entrez sur l'application le code à 6 chiffres qui apparaît sur l'écran du lecteur de glycémie, puis Validez.



## Utilisation quotidienne

1 Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de glycémie comme habituellement.

2 Une fois que le **résultat de glycémie** apparaît à l'écran du lecteur, ouvrez l'application myDiabby sur le téléphone à proximité du lecteur.

3 Le résultat de glycémie s'envoie automatiquement sur l'application myDiabby !


*Si vous avez précisé sur le lecteur le marquage avant/après repas, celui-ci sera bien transféré sur myDiabby.*



### Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la glycémie apparaît sur l'application myDiabby, **COCHEZ** ou **VÉRIFIEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.

Vous pouvez **ajouter des remarques** ou doses d'insuline.

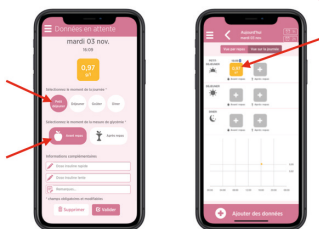

Pour une question sur l'application myDiabby :  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Élysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare