

## GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare\*




Lifescan  
OneTouch Verio Flex®

## Couplage du lecteur avec l'application myDiabby

Lorsque vous coupez votre lecteur de glycémie OneTouch Verio Flex à l'application myDiabby, la date et l'heure se règlent automatiquement sur le lecteur à partir de la date et heure du téléphone.

- 1 Activez le **Bluetooth** sur le smartphone
- 2 Connectez-vous sur l'**application myDiabby** et ouvrez l'onglet « **Mes objets connectés** »
- 3 Sélectionnez « **Je connecte mon lecteur de glycémie capillaire** », puis sélectionner votre lecteur dans la liste

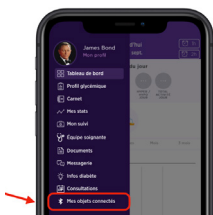

- 4 Cliquez sur le bouton « **Je connecte mon lecteur** »



- 5 Allumez le lecteur OneTouch Verio Flex

- 6 **Activez le Bluetooth sur le lecteur en appuyant simultanément sur les boutons ▲ et OK.** Le Logo Bluetooth ⌘ apparaît à l'écran du lecteur.

(Si le symbole Bluetooth ⌘ est déjà allumé sur le lecteur de glycémie, vous pouvez passer à l'étape 7 directement.)



7 Sur l'application myDiabby, cliquez sur le bouton «Rechercher mon lecteur»



8 Le lecteur apparaît à l'écran. Cliquez sur «Ajouter»



9 Entrez sur l'application le code à 6 chiffres qui apparaît sur l'écran du lecteur de glycémie, puis Validez.



## Utilisation quotidienne

1 Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de glycémie comme habituellement.

2 Une fois que le résultat de glycémie apparaît à l'écran du lecteur, ouvrez l'application myDiabby sur le téléphone à proximité du lecteur.

3 Le résultat de glycémie s'envoie automatiquement sur l'application myDiabby !


*Si vous avez précisé sur le lecteur le marqueur avant/après repas, celui-ci sera bien transféré sur myDiabby.*



### Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la glycémie apparaît sur l'application myDiabby, **COCHEZ** ou **VÉRIFIEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.

Vous pouvez **ajouter des remarques** ou doses d'insuline.

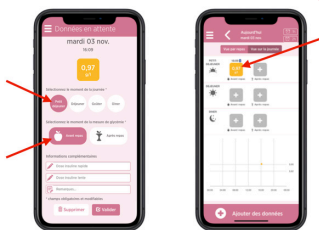

Pour une question sur l'application myDiabby :  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare

GCOTVFO2D20241601FR