

## GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare\*



omnipod<sup>®</sup>  
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

## Partage des données de la pompe avec l'application myDiabby avec un téléphone

### Matériel nécessaire

Le **smartphone Android** sur lequel a été téléchargée l'**application myDiabby**, compte patient **connecté**.



Le PDM de l'Omnipod Dash


Un adaptateur permettant de brancher un câble USB sur le smartphone



Le câble USB de la pompe Omnipod Dash

### Marche à suivre

- Ouvrez l'**application myDiabby** sur votre téléphone et connectez-vous avec vos identifiants
- Branchez **d'abord le câble au téléphone** grâce à l'adaptateur
- Déverrouillez** votre PDM Dash (avec votre code PIN). Ensuite, **branchez le câble au PDM Dash**
- Le PDM affiche le message « **Exporter les données du PDM** » ou « **Charger le PDM ?** ». > Cliquez sur « **EXPORTER** ». **Patientez** pendant la « **Préparation des fichiers pour exportation** »
- Le PDM indique « **Les données de votre PDM sont prêtes à être exportées** ». Cliquez sur « **Terminé** ».
  - Le PDM est prêt pour le transfert des données sur le téléphone.
  - Le symbole du câble clignote et une barre de chargement apparaît pendant le partage des données. **Patientez**.

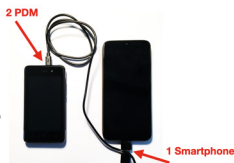

#### Attention :

Ne débranchez pas le câble du lecteur ou du téléphone pendant le partage des données. S'il y a beaucoup de données à partager, le transfert peut prendre plusieurs minutes.



- Les données de la pompe s'affichent sur l'application myDiabby! Vous pouvez maintenant débrancher le téléphone et le PDM

# Partage des données de la pompe avec l'application myDiabby avec un ordinateur


- 1 Sur un ordinateur, téléchargez et installez le logiciel "myDiabby Uploader" depuis la page [www.mydiabby.com/uploader](http://www.mydiabby.com/uploader)



myDiABBY  
UPLOADER


MyDiabby Uploader est un petit logiciel à installer sur ordinateur qui **permet de télécharger les données de lecteurs de glycémie, capteurs de glycémie et pompes à insuline sur votre compte myDiabby.**

- 2 Une fois le logiciel téléchargé, ouvrez-le et **connectez-vous avec vos identifiants myDiabby habituels.**

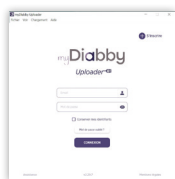

- 3 Choisissez l'appareil à télécharger (**Omnipod**) dans la liste, puis cliquez sur **Valider**.


- 4 Déverrouillez le PDM Dash avec le code pin, puis **branchez le PDM Dash à l'ordinateur** grâce à un câble USB.

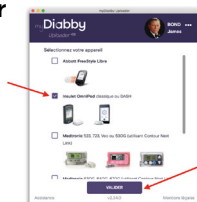

- 5 Sur le PDM Dash, choisissez « **Exporter les données** ». Attendez la fin de l'export des données puis appuyez sur OK. Cliquez sur « **Envoyer** » sur myDiabby Uploader.



- 6 Les données se chargent maintenant sur myDiabby. Une fois le chargement terminé, pour accéder aux données sur myDiabby, cliquez sur le bouton « **Voir les données** »

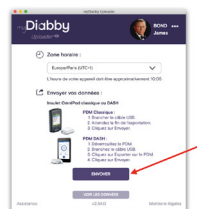

- 7 Les résultats sont maintenant disponibles sur myDiabby (débits de base, bolus, glycémies, etc...)

Pour une question sur l'application myDiabby :  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare

GCOMINDV02D20241601FR