

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*



NFC-Verbindung von Blutzucker-Messgeräts Glucofix® Tech und Glucofix® Tech 2K

Die Datenübertragung erfolgt über die NFC-Antenne durch Annähern des Blutzucker-Messgeräts an Ihr Smartphone.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit auf dem Blutzucker-Messgerät richtig eingestellt sind, um die Konnektivität mit der App myDiabby nutzen zu können.
- 2 **Aktivieren Sie die NFC** auf Ihrem Smartphone (in den Parametern) *auf einigen Smartphones ist NFC standardmäßig aktiviert und nicht deaktivierbar.*
- 3 Melden Sie sich bei myDiabby an und öffnen Sie den Tab „**Meine verbundenen Geräte**“
- 4 Wählen Sie „**Ich verbinde mein kapillares Blutzucker-Messgerät**“ und wählen Sie danach Ihr Messgerät aus der Liste



- 5 Klick auf den Button „**Ich verbinde mein Messgerät**“
- 6 Aktivieren Sie NFC auf dem Player. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
 - 1 Öffnen Sie das **Einstellungsmenü** des Players : Halten Sie die **Tasten M (Ein/Aus)** und **▲** gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt.
 - 2 Drücken Sie die **Taste ▼**, ein N blinkt.
 - 3 Drücken Sie die **Taste M**, « Aus » erscheint.
 - 4 Drücke den **Knopf ▼**, « On » erscheint.
 - 5 Drücken Sie die **Taste M**, « SET » erscheint, **NFC ist auf Ihrem Player aktiviert.**
 - 6 **Schalten Sie den Player aus:** Halten Sie die Taste M 3 Sekunden lang gedrückt.



7 Die Suche läuft:

- Unter Android **den Blutzucker-Messgerät in der Nähe des NFC-Chips an Ihr Smartphone halten.**
- Auf einem iPhone **den Blutzucker-Messgerät in die Nähe des NFC-Chips halten.** Ihr iPhone vibriert anschließend, sobald der Blutzucker-Messgerät erkannt wird, eine Bestätigung erscheint auf dem Display.

Täglicher Gebrauch

1 Die **Blutzucker-Messung** wie gewohnt mit dem Blutzucker-Messgerät **durchführen.**

2 **Melden Sie sich bei myDiabby** an und öffnen Sie den Tab „**Meine verbundenen Geräte**“

3 Auf dem verbundenen Messgerät auf „**Synchronisieren**“ drücken.


4 Die Suche läuft:

- Unter Android **den Blutzucker-Messgerät in der Nähe des NFC-Chips an Ihr Smartphone halten.**
- Auf einem iPhone **den Blutzucker-Messgerät in die Nähe des NFC-Chips halten.** Ihr iPhone vibriert anschließend, sobald der Blutzucker-Messgerät erkannt wird, eine Bestätigung erscheint auf dem Display.



Im Fall von Schwangerschaftsdiabetes:

Nach Einblenden des Blutzuckerwerts in der App myDiabby, die Tageszeit **ANKREUZEN** oder **ÜBERPRÜFEN**, damit das Ergebnis an der richtigen Stelle im Logbuch erscheint. Sie können **Anmerkungen** oder Insulindosen **hinzufügen**.

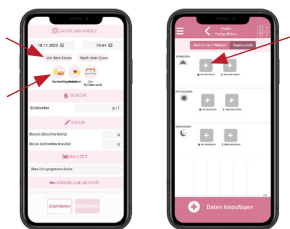

CGGFTV02D20241601DE

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459