

- Mon carnet de suivi partagé avec l'équipe médicale
- Une aide à la compréhension des résultats
- Messagerie directe avec mon équipe médicale
- De l'information sur le diabète
- Possibilité de connecter mes appareils directement

## Questions & Aide



Pour une question médicale :  
Contactez directement votre équipe médicale

Retrouvez l'ensemble des informations  
sur myDiabby Healthcare sur le site web :

[www.mydiabby.com](http://www.mydiabby.com)

myDiabby Healthcare est un dispositif médical.

**myDiabby Healthcare est un outil de suivi et ne saurait remplacer une consultation avec un médecin. En cas d'urgence, veuillez contacter votre médecin ou les services d'urgences.**

GIDTV07D20241601FR

Pour une question sur l'application myDiabby :  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96

\*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



MDHC SAS  
65 Avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE


0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare

- 1 Téléchargez l'application mobile "myDiabby" sur votre smartphone
- 2 Ouvrez l'appli et cliquez sur "S'inscrire"
- 3 Choisissez votre type de diabète



- 4 Remplissez le formulaire d'inscription pour créer votre compte myDiabby

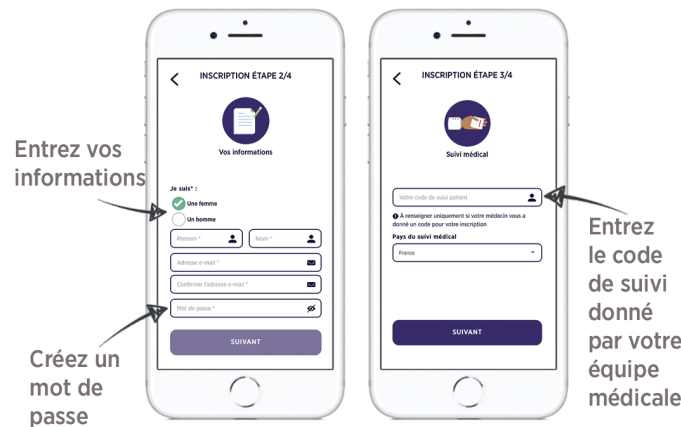


Code de Suivi

à renseigner à l'inscription

L'application diabète connectée à mon équipe médicale

Ce guide d'utilisation met à disposition les éléments de prise en main de l'application myDiabby. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare\*

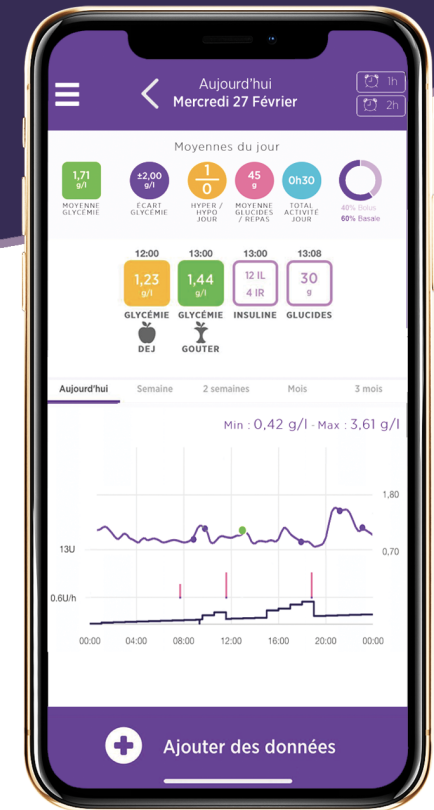

Guide d'utilisation  
Application mobile

# Tableau de bord

Votre tableau de bord affiche vos moyennes du jour et vous permet d'entrer vos résultats

Annotations:

- Menu de l'application
- Revenir au jour précédent
- Vos moyennes du jour
- Les valeurs que vous avez notées aujourd'hui
- Votre courbe de glycémie et d'insuline
- Appuyez sur le bouton "+ Ajouter des données" pour entrer des données manuellement

# Fonctionnalités

Accédez à toutes les options de l'application myDiabby depuis le menu de navigation

Votre compte et paramètres

- **Tableau de bord :** Pour entrer vos résultats

- **Carnet :** Pour visualiser toutes vos données (détails volet de droite)

- **Mon suivi:** Votre dossier médical et traitement

- **Équipe soignante :** Les professionnels de santé qui voient vos données

- **Documents :** Partagez des documents avec votre équipe médicale

- **Messagerie :** Communiquez avec votre équipe médicale

- **Infos diabète:** Fiches pratiques et vidéos sur le diabète

- **Mes objets connectés :** Connectez vos dispositifs médicaux à votre compte myDiabby (Voir les Vidéos Tuto sur la chaîne YouTube myDiabby)

# Carnet

Visualisez toutes vos données saisies manuellement ou issues de vos objets connectés

Pour cela, commencez par cliquer sur **Carnet**




Pour visualiser vos glycémies capillaires, cliquez sur **Tableau**



Exemple de données manuelles et issues d'un lecteur connecté

Pour visualiser vos courbes quotidiennes, cliquez sur **Semainier**

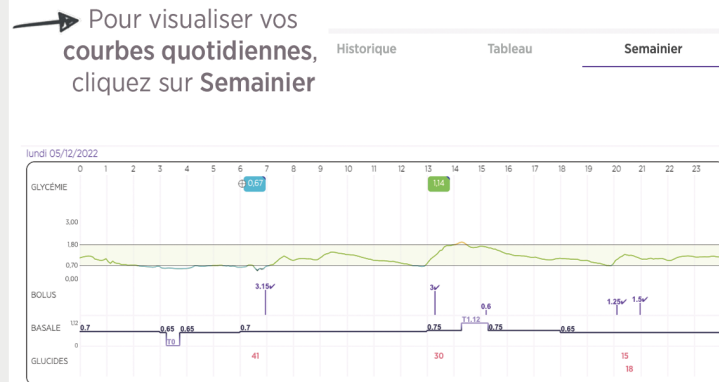

Exemple de données issues d'un capteur de glucose et d'une pompe à insuline