

Le suivi de mon diabète gestationnel

Ce guide d'utilisation met à disposition les éléments de prise en main de l'application myDiabby. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*



- Mon carnet de suivi partagé
- Une aide à la compréhension des résultats
- Messagerie directe avec mon équipe médicale
- De l'information sur le diabète gestationnel
- Des ressources sur l'alimentation

Questions & Aide



Pour une question médicale :
Contactez directement votre équipe médicale

Retrouvez l'ensemble des informations sur myDiabby Healthcare sur le site web :

www.mydiabby.com

myDiabby Healthcare est un dispositif médical.

myDiabby Healthcare est un outil de suivi et ne saurait remplacer une consultation avec un médecin. En cas d'urgence, veuillez contacter votre médecin ou les services d'urgences.

GIDGV07D20241601ER

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

1 Téléchargez l'application mobile "myDiabby" sur votre smartphone




2 Ouvrez l'appli et cliquez sur "S'INSCRIRE"

3 Choisissez Diabète Gestationnel



S'INSCRIRE

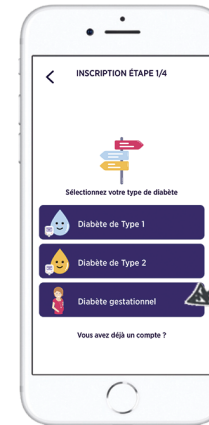


4 Remplissez le formulaire d'inscription pour créer votre compte myDiabby

Entrez la date prévue d'accouchement

Entrez vos informations

Créez un mot de passe

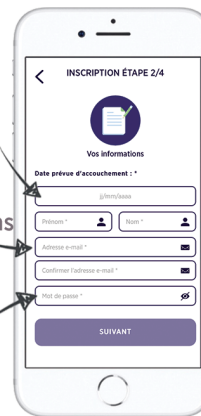


Entrez le code de suivi donné par votre équipe médicale

Code de Suivi



à renseigner à l'inscription

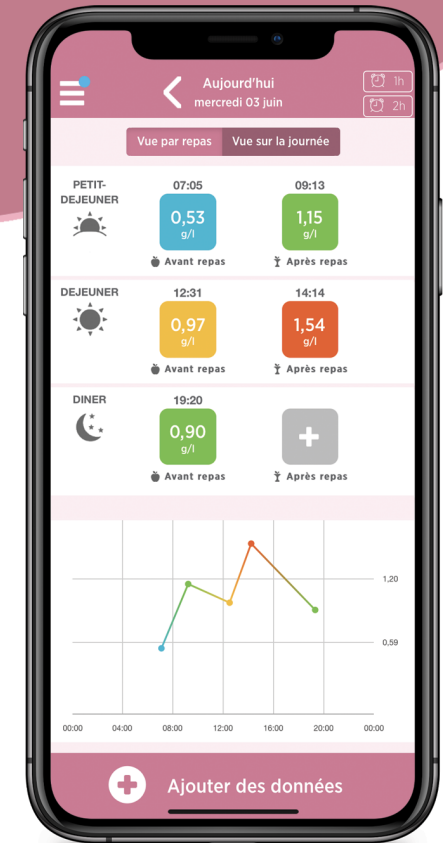

Guide d'utilisation
Application mobile

Tableau de bord


Votre tableau de bord représente les 6 glycémies du jour rythmées par les 3 repas principaux de la journée



A noter : Vous pouvez modifier une donnée en re cliquant dessus

Noter mes résultats

En appuyant sur un bouton +, une fenêtre s'ouvre pour entrer vos résultats

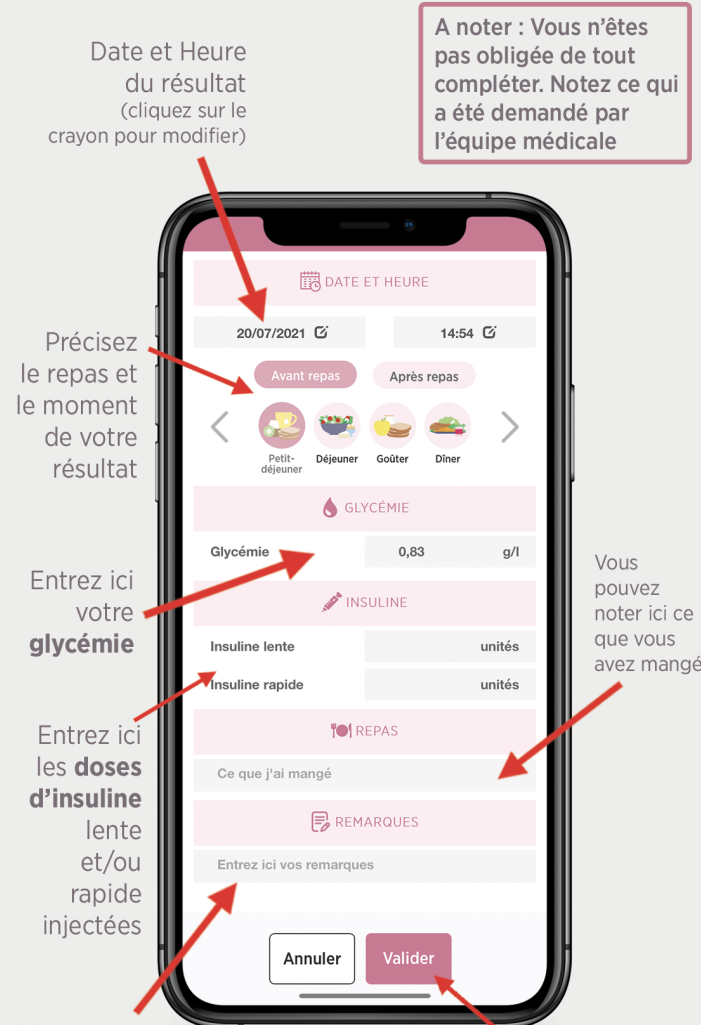


Fonctionnalités

L'application myDiabby vous donne accès à différentes fonctionnalités depuis le menu de navigation

- **Tableau de bord :** Pour entrer vos résultats
- **Carnet :** L'ensemble de vos résultats
- **Mes stats :** Suivez votre évolution de poids de grossesse et vos courbes foetales
- **Mon suivi :** Vos objectifs et votre traitement
- **Equipe soignante :** Les professionnels de santé qui voient vos résultats
- **Documents :** Partagez des documents avec votre équipe médicale
- **Messagerie :** Echangez avec votre équipe médicale
- **Vidéos :** Vidéos sur le diabète gestationnel
- **Alimentation :** Fiches pratiques et recettes sur l'alimentation adaptée au diabète gestationnel
- **Consultations :** Le suivi de vos consultations

Votre compte et paramètres

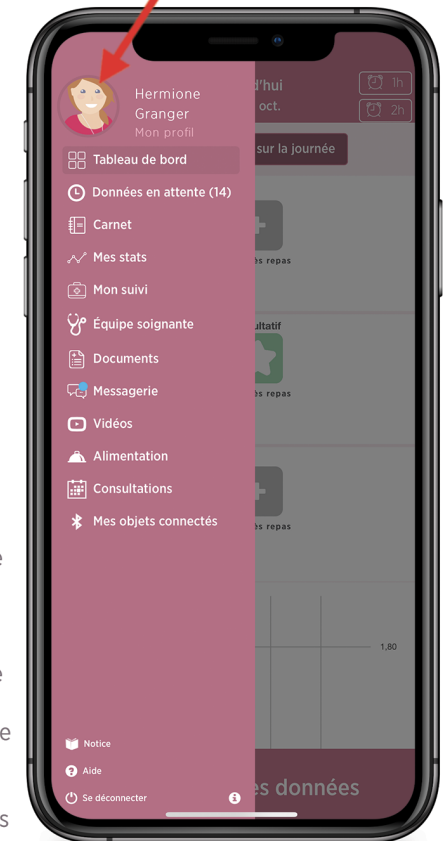

- **Mes objets connectés :** Connectez un lecteur de glycémie bluetooth (Voir les Vidéos Tuto sur la chaîne YouTube myDiabby)