


GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*



Couplage du lecteur avec l'application myDiabby

- 1 Assurez-vous que le lecteur de glycémie est réglé à la bonne date et heure pour utiliser la connectivité avec l'application myDiabby.
- 2 Activez le **Bluetooth** sur le **smartphone**
- 3 Connectez-vous sur l'**application myDiabby** et ouvrez l'onglet «**Mes objets connectés**»
- 4 Sélectionnez «**Je connecte mon lecteur de glycémie capillaire**», puis sélectionner votre lecteur dans la liste.

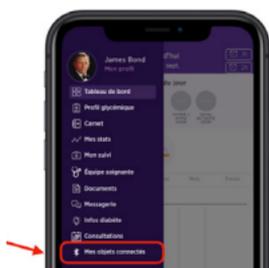

- 5 Cliquez sur le bouton «**Je connecte mon lecteur**»



- 6 Mettre le lecteur de glycémie en mode appairage. Pour cela :
 - Allumer le lecteur de glycémie grâce au bouton **S**
 - Faire un appui long sur le bouton **S** jusqu'à voir «**SET**» apparaître à l'écran du lecteur
 - Appuyer sur le bouton **▶** pour voir «**Yes**» en bas à gauche de l'écran, puis appuyer sur le bouton **S**
 - «**bT**» apparaît à l'écran du lecteur. Appuyez 3 fois sur **▶** pour voir apparaître «**PAir**» en bas à droite de l'écran du lecteur. Puis appuyez sur le bouton **S**.
 - Le mot «**Pin**» apparaît à l'écran du lecteur.



- 7 Sur l'application myDiabby, cliquez sur le bouton «Rechercher mon lecteur»



- 8 Entrez sur l'application le code à 6 chiffres qui apparaît sur l'écran du lecteur de glycémie, puis Validez.



- 9 Le lecteur apparaît à l'écran. Cliquez sur «Ajouter»



Utilisation quotidienne

- 1 Faire la mesure de glycémie comme habituellement.
- 2 Après avoir fait la mesure de glycémie, retirez la bandelette du lecteur. Le bluetooth s'allume sur le lecteur de glycémie.
- 3 Ouvrez l'application myDiabby à proximité du lecteur de glycémie. (Vérifiez que le Bluetooth est allumé sur le smartphone).
- 4 Le résultat de glycémie s'envoie automatiquement sur l'application myDiabby !



Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la glycémie apparaît sur l'application myDiabby, **COCHÉZ** ou **VÉRIFIEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.

Vous pouvez **ajouter des remarques** ou doses d'insuline.



GCPCSV02D20241601FR

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459