


- 3 Ouvrez l'application **myDiabby** (sur smartphone OU ordinateur) et cliquez sur «Ajouter des données»



- 4 Défilez jusqu'en bas de l'écran et cliquez sur «Importer un fichier .csv» puis «Importer un fichier .csv CareLink »

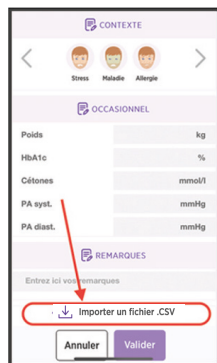

- 5 Choisissez le fichier .csv qui a été enregistré sur le téléphone ou l'ordinateur depuis le site CareLink

- 6 Les résultats de la pompe MiniMed 780G et de son capteur sont maintenant partagés sur l'application myDiabby !



A NOTER

L'ensemble des données CareLink sont partagées sur myDiabby Healthcare lors du partage : Données de glucose en continu, glycémies capillaires, Basal, Bolus, glucides, informations de la pompe ...

myDiabby

HEALTHCARE

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*



Medtronic MiniMed 780G

Etape 1 :
Mettre les données de la pompe sur la plateforme CareLink

Si vous utilisez votre pompe avec l'application **MiniMed Mobile**, vos données sont automatiquement enregistrées sur **CareLink**.



Medtronic

Si vous n'utilisez pas l'application, téléchargez sur CareLink les données de la pompe grâce au lecteur associé à celle-ci. Plus d'informations sur : carelink.minimed.eu/app/install-uploader



Etape 2 :
Partager les données de CareLink sur myDiabby Healthcare

GCM780V02D20241601FR

Pour une question sur l'application myDiabby : support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78 Belgique : 02 320 11 96


*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare

Méthode 1 : Connecter votre compte CareLink au compte myDiabby Healthcare

- Ouvrez l'application **myDiabby** (sur smartphone OU ordinateur) et cliquez sur l'onglet «**Mes Objets connectés**»
- Cliquez sur la catégorie «**Je connecte une application santé**»
- Au sein de la liste des applications compatibles, **sélectionnez «CareLink»**
- Indiquez votre **identifiant CareLink** dans la pop-up dédiée. Il s'agit du même identifiant que celui que vous utilisez pour **vous connecter à CareLink** ou sur l'application **MiniMed Mobile**.

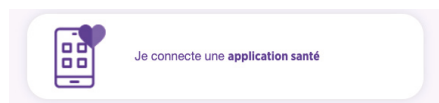

Partagez vos données CareLink sur myDiabby Healthcare

Entrez votre nom d'utilisateur CareLink :

Il s'agit de l'identifiant que vous utilisez sur CareLink ou sur l'application MiniMed Mobile

Valider

- Rendez-vous sur votre **compte CareLink** pour accepter le partage en cliquant sur le lien présent dans la pop-up ou via le mail automatique que vous avez reçu.

Partage avec un établissement de santé

Nouvelles demandes :

myDiabby Healthcare ● Demande en attente

France
75008, FR


Nom du patient : Fred Weasley

Approuver Rejeter

Votre prestataire médical a demandé à se lier à votre compte CareLink™ Personal. Lorsque le processus de liaison sera terminé, votre prestataire médical sera en mesure de voir les données de vos dispositifs médicaux liés qui ont été télétransmises dans votre compte CareLink™ Personal en dehors de vos consultations en présentiel.

- Une fois le partage accepté, **retournez sur votre compte myDiabby Healthcare, les données sont maintenant partagées automatiquement !**

Un délai de quelques minutes peut être nécessaire pour assurer la récupération des données lors de votre première connexion.

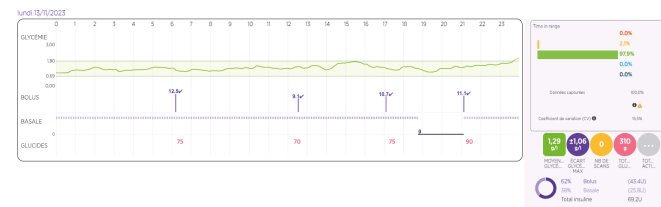

A NOTER

L'ensemble des données CareLink sont partagées sur myDiabby Healthcare lors du partage : Données de glucose en continu, glycémies capillaires, Basal, Bolus, glucides, informations de la pompe ...

Méthode 2 : Récupérer manuellement les données de CareLink

Depuis le navigateur internet d'un ordinateur OU d'un smartphone:

- Rendez-vous sur le site carelink.minimed.com et connectez-vous au compte patient avec les mêmes identifiants que pour l'application **MiniMed Mobile**, ou les identifiants **CareLink** directement.
- Sur le site CareLink, cliquez sur :
- L'onglet «**Rapports**» en haut à gauche (icône courbe)
- Puis, en bas de page, «**Exportation des données (CSV)**»

> Un fichier .csv contenant les résultats de la pompe s'enregistre sur le téléphone ou l'ordinateur.

Se connecter à CareLink™ PERSONAL

Pays et région: France

Langue: Français

Continuer

Mot de passe oublié ?

ou

Créer un compte

