

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*




Contour
next

Couplage du lecteur avec l'application myDiabby


⌚ Avant de démarrer, vérifiez que le lecteur de glycémie est réglé à la **même date et heure que le téléphone**. Sinon, réglez-le en suivant le mode d'emploi du lecteur.

1 Activez le **Bluetooth** sur le smartphone.

2 Connectez-vous sur l'**application myDiabby** et ouvrez l'onglet « **Mes objets connectés** », puis **sélectionner votre lecteur** dans la liste.

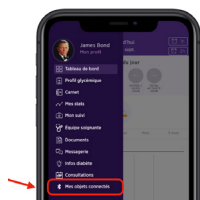

3 Allumez le lecteur Contour Next en faisant un appui long sur le bouton OK.

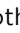4 Activez le Bluetooth sur le lecteur en appuyant longtemps sur le bouton ▲. Le Logo Bluetooth  apparaît à l'écran du lecteur.



5 Sur l'**application myDiabby**, cliquez sur le bouton « **Je connecte mon lecteur de glycémie capillaire** », puis « **ASCENSIA Contour NEXT** ».



6 Cliquez sur le bouton « **Je connecte mon lecteur** ».



7 Entrez sur l'application le code à **6 chiffres** qui apparaît sur l'écran du lecteur de glycémie, puis Validez.



8 Le lecteur apparaît à l'écran. Cliquez sur « **Ajouter** ».

Le lecteur de glycémie est maintenant connecté à l'application myDiabby.



Utilisation quotidienne

1 **Faire la mesure de glycémie** comme habituellement.

2 Une fois que le **résultat de glycémie apparaît à l'écran du lecteur, ouvrez l'application myDiabby sur le téléphone à proximité du lecteur.**

(Vérifiez que le Bluetooth est bien actif sur le smartphone)



3 Le résultat de glycémie s'envoie automatiquement sur myDiabby !


Si vous avez besoin de modifier le repas ou moment de la journée correspondant à cette glycémie, vous pouvez cliquer dessus et indiquer les informations correspondantes.



Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la glycémie apparaît sur l'application myDiabby, **COCHÉZ** ou **VÉRIFIEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.

Vous pouvez **ajouter des remarques** ou doses d'insuline.

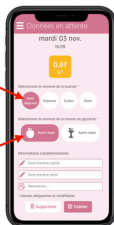

GCCNV02D20241601FR

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare