

## GUIDE DE CONNEXION


Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare\*



Contour  
next ONE<sup>®</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

### Couplage du lecteur avec l'application myDiabby

- 1 Assurez-vous que le lecteur de glycémie est réglé à la bonne date et heure pour utiliser la connectivité avec l'application myDiabby.
  - 2 Activez le **Bluetooth sur le smartphone**
  - 3 Connectez-vous sur l'**application myDiabby** et ouvrez l'onglet «**Mes objets connectés**»
  - 4 Activez le **Bluetooth sur votre lecteur** de glycémie Contour next ONE : Pour cela **appuyez et maintenez enfoncé le bouton OK** jusqu'à ce que le **voyant BLEU clignote sur le lecteur** et que le symbole Bluetooth  s'allume à l'écran du lecteur.
  - 5 Cliquez sur le bouton "**Je connecte mon lecteur**", puis sur "**Rechercher mon lecteur**" pour lancer le couplage.
  - 6 Votre lecteur apparaît à l'écran. Cliquez sur le bouton "**Ajouter**".
- Votre lecteur de glycémie est maintenant couplé à votre application myDiabby !

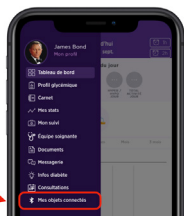

# Utilisation quotidienne

- 1 Faire la mesure de glycémie comme habituellement.



- 2 Lorsque la glycémie s'affiche sur l'écran du lecteur de glycémie, le symbole Bluetooth indique que le lecteur est prêt à envoyer le résultat à l'application myDiabby.

- 3 Vérifiez que le **Bluetooth est activé sur le smartphone**, et ouvrez l'application myDiabby, à côté du lecteur toujours allumé.

- 4 Votre glycémie est remplie automatiquement dans votre carnet glycémique.


Si vous avez besoin de modifier le repas ou moment de la journée correspondant à cette glycémie, vous pouvez cliquer dessus et indiquer les informations correspondantes.



## Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la glycémie apparaît sur l'application myDiabby, **COCHÉZ** ou **VÉRIFIEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.

Vous pouvez **ajouter des remarques** ou doses d'insuline.

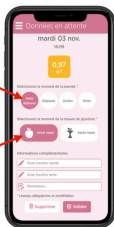

GCCNOV02D20241601FR

Pour une question sur l'application myDiabby :  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare