

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*

Couplage de la pompe avec l'application myDiabby


- 1 Téléchargez les 2 applications myDiabby et mylife sur le téléphone. Connectez-vous sur chacune des 2 applications.

L'application mylife permet de collecter les données de la pompe à insuline Ypsopump. Mylife enverra ensuite automatiquement les données sur myDiabby Healthcare, qui est l'application qui permet d'être en lien avec l'équipe médicale.




- 2 Connectez en Bluetooth la pompe Ypsopump à l'application mylife en suivant le guide de la pompe à insuline.


- 3 Connectez-vous sur l'application myDiabby et ouvrez l'onglet « Mes objets connectés »

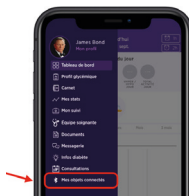

- 4 Sélectionnez « Je connecte ma pompe à insuline », puis « Ypsopump ». Cliquez sur le bouton « Connecter mon application de santé ».

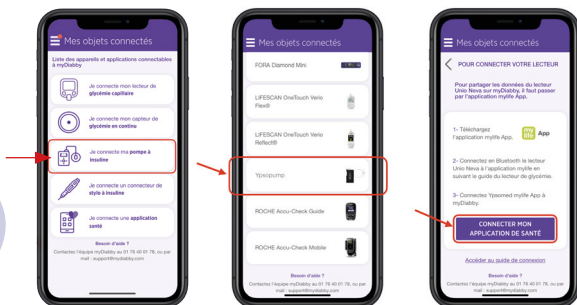

5 Entrez les identifiants du compte mylife App puis Validez.

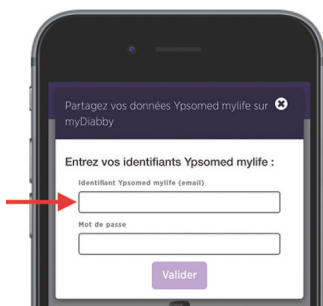


6 Les données de mylife Ypsopump sont maintenant partagées sur l'application myDiabby !



A NOTER

- Toutes les données entrées manuellement ou en Bluetooth dans l'application mylife sont partagées avec l'application myDiabby (données de pompe, glycémies, repas, etc...)
- Les données sont envoyées régulièrement de l'application mylife à l'application myDiabby. Il peut donc parfois y avoir un petit délai de synchronisation sur l'application myDiabby qui est tout à fait normal.

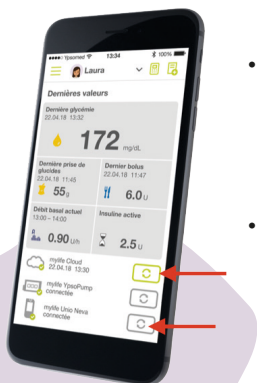

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare

GCYPV02D20241601FR