



ACCUCHEK®

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*

Couplage du lecteur avec l'application myDiabby

Assurez-vous que le lecteur de glycémie est réglé à la bonne date et heure pour utiliser la connectivité avec l'application myDiabby.

1 Notez sur un papier le numéro de série de l'adaptateur Bluetooth



2 Activez le Bluetooth sur le smartphone

3 Connectez-vous sur l'application myDiabby et ouvrez l'onglet «Mes objets connectés»



4 Sélectionnez « Je connecte mon lecteur de glycémie capillaire », puis sélectionner votre lecteur dans la liste.



5 Cliquez sur le bouton « Je connecte mon lecteur »



6 Branchez l'adaptateur Bluetooth sur le lecteur de glycémie Accu-Chek Mobile.




7 Allumez l'adaptateur Bluetooth en appuyant sur le bouton latéral. Cela allume le lecteur de glycémie et le met en «mode couplage», et l'adaptateur clignote en vert.



- 8 Sur l'application myDiabby, cliquez sur le bouton «Rechercher mon lecteur»



- 9 Entrez sur l'application le numéro de série à 6 chiffres de l'adaptateur, que vous aviez noté, puis Validez.

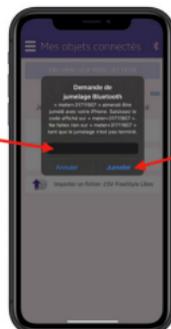

- 10 Le lecteur apparaît à l'écran. Cliquez sur «Ajouter».

Le lecteur Accu-Chek Mobile est maintenant couplé à l'application myDiabby!



Utilisation quotidienne


- 1 **Faire la mesure de glycémie** comme habituellement.
- 2 Une fois que le résultat de glycémie apparaît à l'écran, **allumez l'adaptateur Bluetooth** grâce au bouton latéral
- 3 **Ouvrez l'application myDiabby** à proximité du lecteur de glycémie. (*Vérifiez que le Bluetooth est allumé sur le smartphone.*)
- 4 **Le résultat de glycémie s'envoie automatiquement sur l'application myDiabby !**



Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la glycémie apparaît sur l'application myDiabby, **COCHEZ** ou **VÉRIFIEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.

Vous pouvez **ajouter des remarques** ou doses d'insuline.

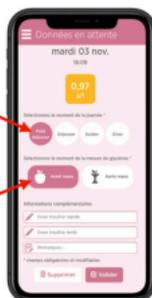

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare

GCACCMV02D20241601FR