

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*



Kopplung der Pumpe mit der App myDiabby

1 Laden Sie die beiden Apps **myDiabby** und **mylife** auf das Telefon herunter.

Melden Sie sich bei beiden Apps an.


Die App mylife ermöglicht die Erfassung der Daten der Insulinpumpe Ypsopump. mylife sendet in der Folge automatisch Daten an myDiabby Healthcare, die App als Schnittstelle zum Ärzteteam.






2 Schließen Sie die Pumpe Ypsopump gemäß den Hinweisen der Anleitung für die Insulinpumpe an die App mylife an.


3 Melden Sie sich bei **myDiabby** an und öffnen Sie den Tab „Meine verbundenen Geräte“

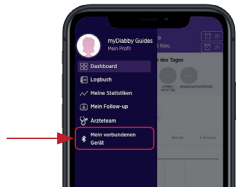


4 Wählen Sie „Ich verbinde meine Insulinpumpe“, dann „Ypsopump“. Klicken Sie auf den Button „Meine Gesundheits-App verbinden“.

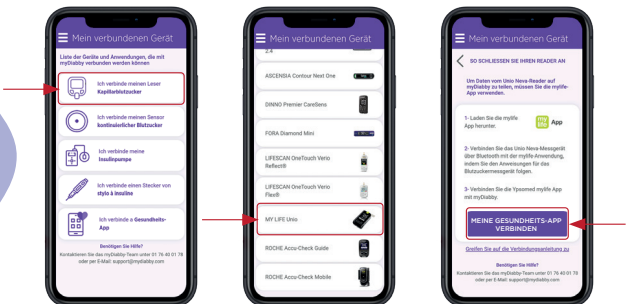

- 5** Geben Sie die **Kontokenndaten der mylife-App** ein und **Bestätigen**.

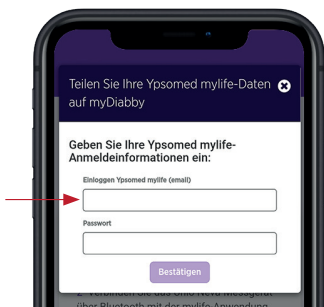

- 6** Die mylife Ypsopump-Daten werden jetzt auf der App myDiabby geteilt!

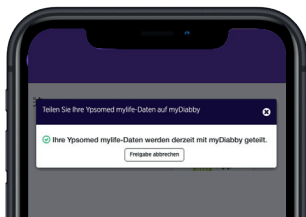

HINWEIS

- Alle manuell oder über Bluetooth in der App mylife eingegebenen Daten werden mit der App myDiabby geteilt (Pumpendaten, Blutzuckerwerte, Mahlzeiten usw.)
- Sobald die Mylife- und myDiabby Healthcare-Konten verbunden sind, werden die Daten regelmäßig automatisch gesendet. Diese Sendung kann dazu führen eine Verzögerung zwischen der Synchronisierung der Daten auf Mylife und ihrer Anzeige auf myDiabby Healthcare.



Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.

Dokument anwendbar ab myDiabby Healthcare Version 2.30



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



0459