

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*




- 1** Connectez en bluetooth la pompe TouchCare Nano ou 300 à l'application EasyPatch ou téléchargez les données de votre PDM sur l'application EasyTouch, en suivant le guide de la pompe à insuline.

L'application EasyPatch permet de piloter la pompe avec le smartphone, les données sont automatiquement téléchargées sur le **cloud Medtrum**. Les données disponibles sur le cloud Medtrum seront ensuite automatiquement envoyées sur myDiabby Healthcare, qui est l'application qui permet d'être en lien avec l'équipe médicale.

- 2** Connectez-vous à votre compte myDiabby Healthcare depuis un ordinateur OU l'application mobile myDiabby.

- 3** Cliquez sur l'onglet « Mes objets connectés », puis sur « Je connecte une application santé ».

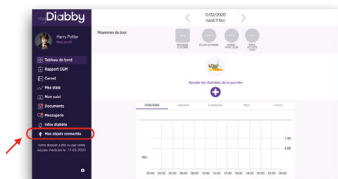

- 4** Choisissez le bouton **Medtrum**




- 5** Entrez votre **identifiant** et le **mot de passe** du compte EasyPatch / EasyTouch. Lisez les conditions d'utilisation, **cochez la case d'acceptation**, entrez votre **nom** dans le champ dédié puis **cliquez sur « Autoriser »** pour accepter le partage des données.

6 Ce message apparaît à l'écran et confirme que le compte **cloud Medtrum est bien connecté à myDiabby Healthcare.**

Cliquez sur « **Retour** » pour retourner sur myDiabby Healthcare.



Vos données de pompe à insuline sont maintenant partagées sur myDiabby Healthcare !

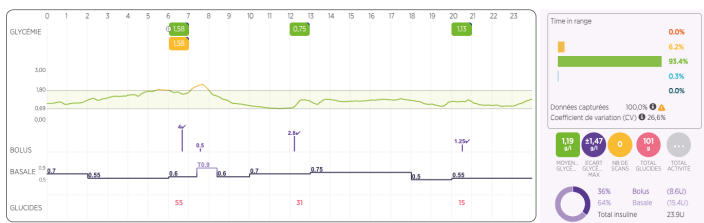

A NOTER

Vérifiez régulièrement que les données de votre pompe à insuline TouchCare sont bien visibles sur le cloud Medtrum pour que l'équipe médicale puisse voir les résultats sur myDiabby Healthcare.

> Le téléchargement des données est automatique sur l'application EasyPatch et manuel sur l'application EasyTouch.

> Une fois le compte cloud Medtrum et myDiabby Healthcare connectés, **le cloud Medtrum envoie automatiquement les données de pompe en continu sur myDiabby Healthcare** dès que celles-ci sont disponibles. Cet envoi peut occasionner un délai de quelques minutes entre le chargement des données sur le cloud Medtrum et leur affichage sur myDiabby Healthcare.

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78
Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.20 de myDiabby Healthcare