

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*




Si vous utilisez l'application Dexcom G6 ou One, passez directement à l'étape 3.

- 1** Créez un compte Dexcom Clarity depuis ce site : <https://uam2.dexcom.com//index.html#/register>





- 2** Téléchargez le Dexcom Clarity Uploader depuis cette page : <https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/home-user-upload>

Puis téléchargez les données du capteur sur Dexcom Clarity en suivant les instructions sur l'écran.

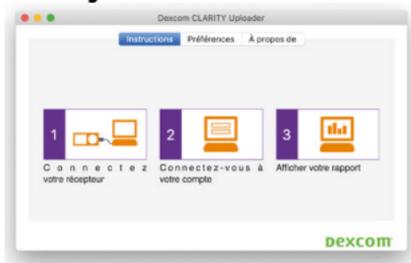


- 3** Connectez-vous au compte myDiabby depuis un ordinateur OU l'application mobile.

- 4** Cliquez sur l'onglet « Mes objets connectés », puis sur « Je connecte mon capteur de glycémie en continu ».

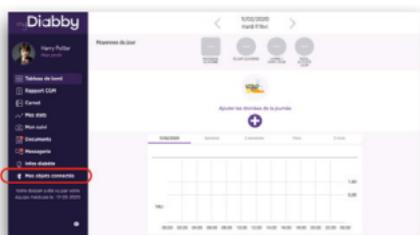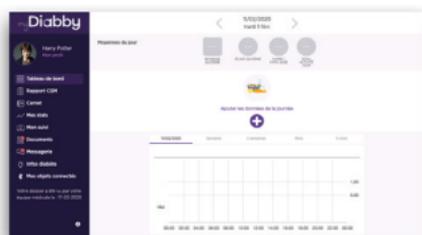

5 Choisissez le bouton **Dexcom**, puis cliquez sur le bouton « **CONNECTER MON APPLICATION DE SANTE** »

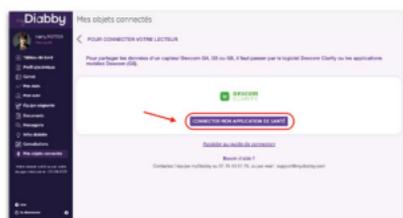


7 Ce message apparaît à l'écran sur et confirme que le compte **Dexcom est bien connecté à myDiabby Healthcare.**

Cliquez sur « **Retour** » pour retourner sur myDiabby.

Les données de glucose en continu sont maintenant partagées sur myDiabby Healthcare !

6 Entrez l'**identifiant et le mot de passe du compte Dexcom.** Lisez les conditions d'utilisation, puis **entrez votre nom et cliquez sur « Autoriser » pour accepter.**

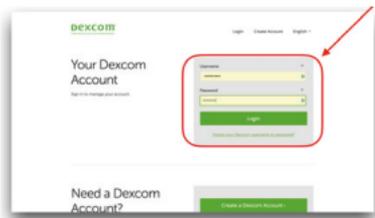

A NOTER

Téléchargez régulièrement les données du capteur Dexcom sur Dexcom Clarity pour que l'équipe médicale puisse voir les résultats sur myDiabby.

> Une fois Dexcom et myDiabby connectés, **Dexcom envoie automatiquement les données sur myDiabby** 1 fois par heure. Les données affichées respectent un décalage de 3 heures par rapport aux dernières données disponibles.

> Si vous utilisez un **Dexcom G6 couplé à la pompe à insuline Tandem t:slim X2** ou si vous récupérez les données sur le **récepteur du Dexcom G6**, il vous suffit de télécharger les données via **myDiabby Uploader** pour les afficher sur votre compte myDiabby. Pour cela, vous pouvez vous **référer aux guides dédiés.**

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare